

## Co potrzeba, żeby uruchomić Dermacro

Komputer PC z jednym z poniższych systemów operacyjnych:

- **Windows XP** (co najmniej z **Service Pack 3**)
- **Windows Vista**
- **Windows 7**
- **Windows 8**

Możliwe jest wykorzystanie także komputerów pracujących pod kontrolą starszych systemów operacyjnych Windows.

Uwaga ogólna, dotycząca każdego systemu: zalecamy i zachęcamy Państwa do uaktualniania i **instalowania w systemie wszelkich poprawek krytycznych** dostarczanych przez producenta systemu operacyjnego lub producenta komputera.


Aplikacja wymaga do pracy także:

- Pakiet **.NET Framework 2.0**. Zalecane jest zainstalowanie najnowszego zestawu poprawek Service Pack (obecnie: SP3).


## Jak zainstalować program Dermacro

Przykład dotyczy systemu Windows 7.

Z katalogu **Instalacja** znajdującego się na płycie CD uruchamiamy plik **Dermacro.msi**

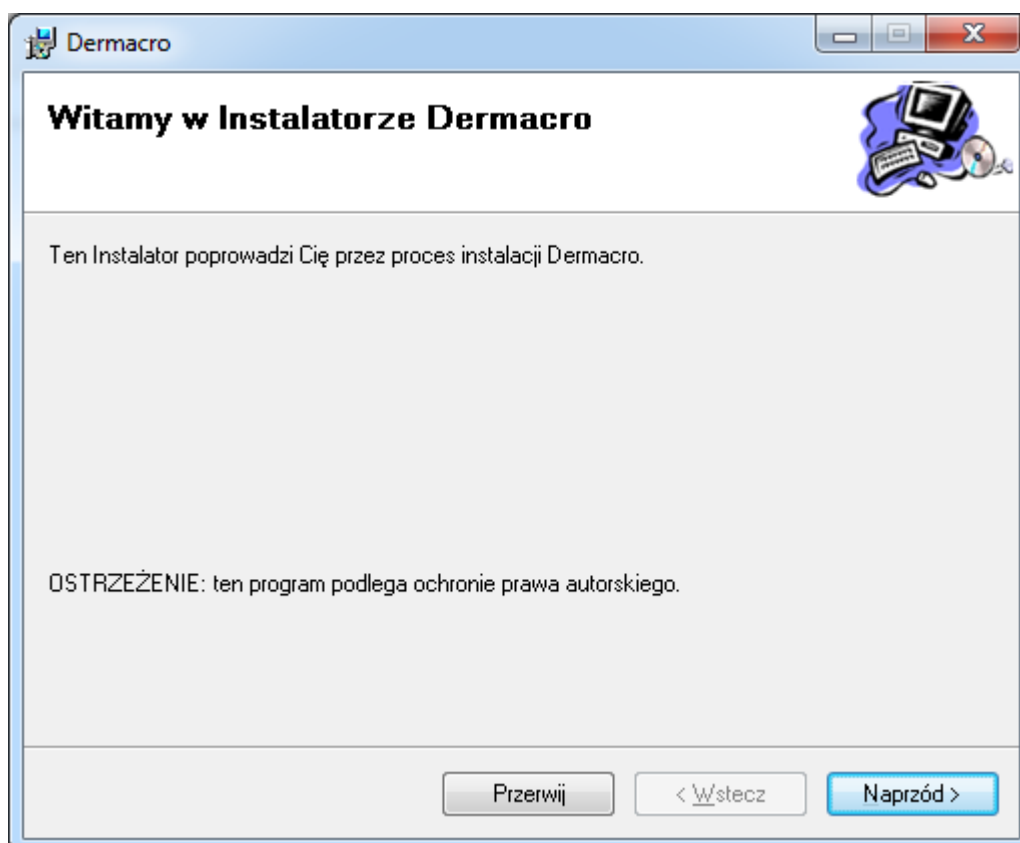


Naciskamy „*Naprzód*”:

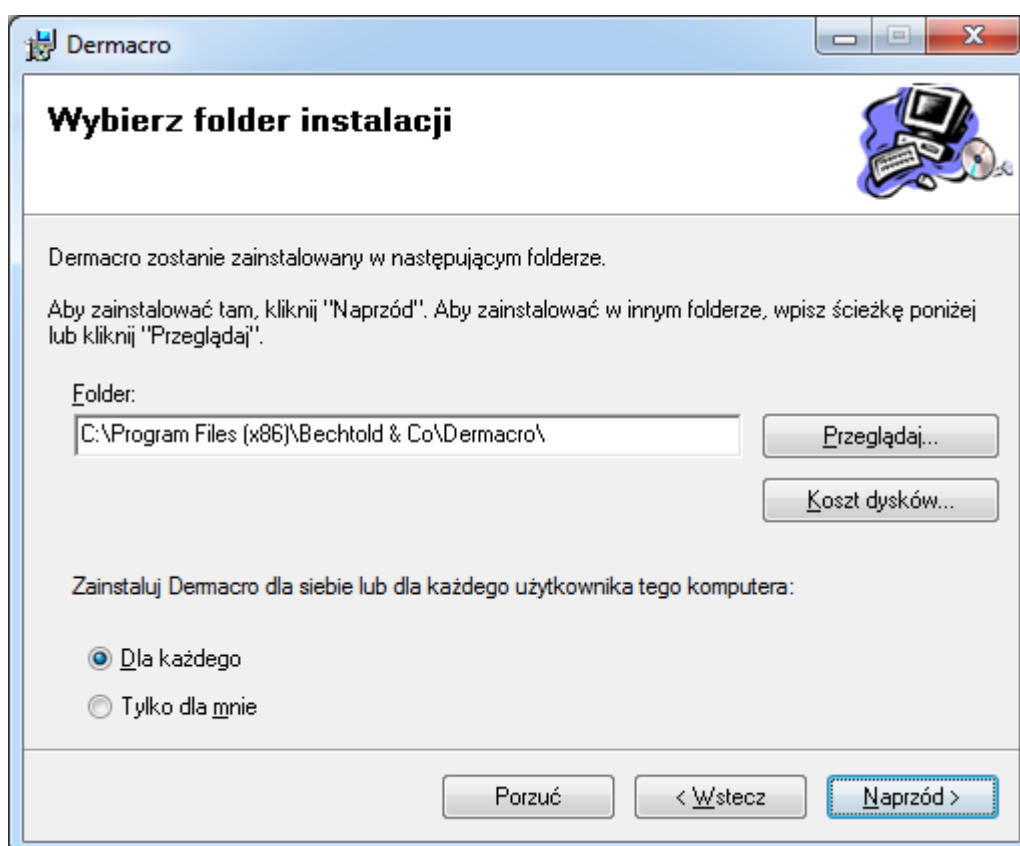


W tym kroku możemy określić czy skrót programu ma być dostępny tylko dla użytkownika, który instaluje program czy też ma być widoczny na pulpicie każdego użytkownika komputera. Możemy również zmienić dysk i folder, gdzie program zostanie umieszczony w trakcie instalacji.


Kolejny krok to potwierdzenie instalacji:

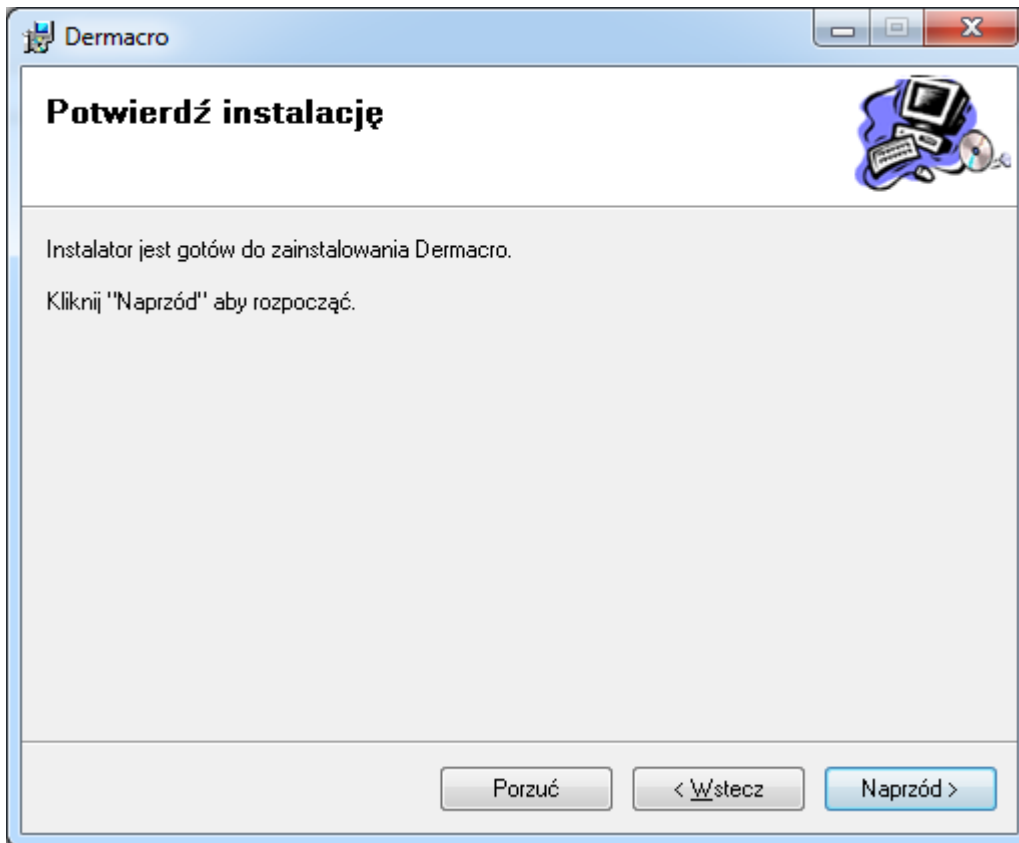

Potem następuje właściwa instalacja (w Windows 7 i Windows Vista pojawi się okno kontroli uprawnień użytkownika, w którym należy potwierdzić instalację):

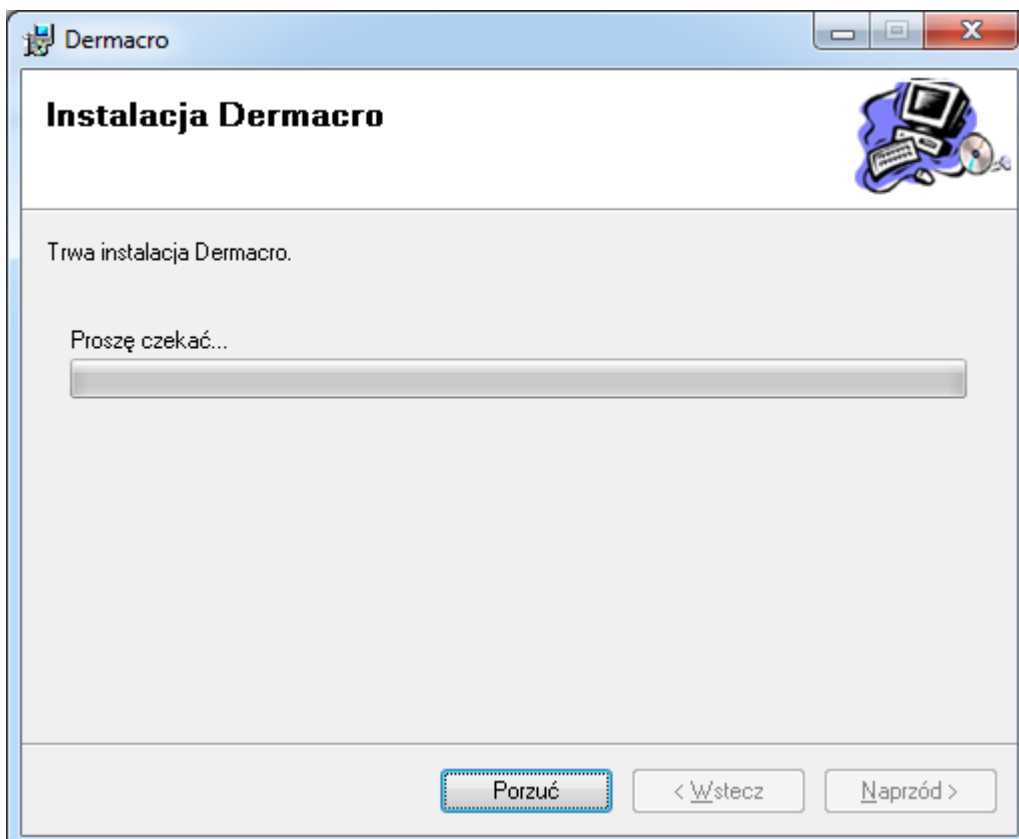

I po udanej operacji zobaczymy końcowe okno:

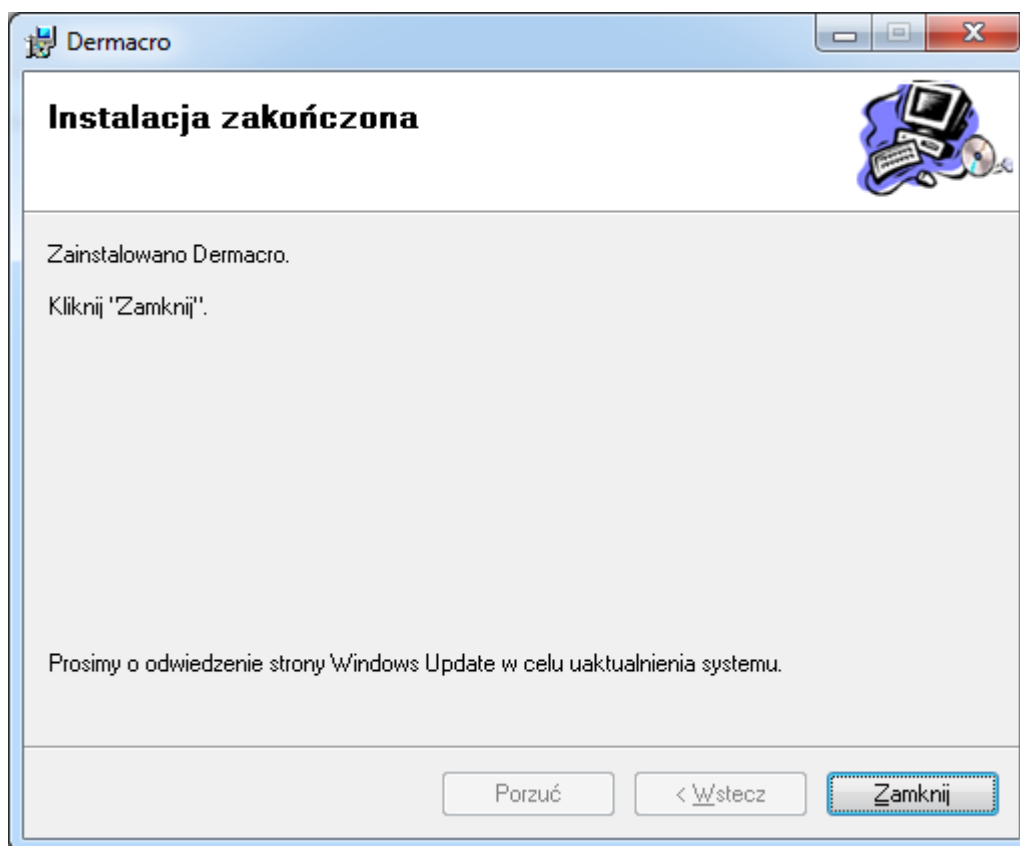


## Jak odinstalować program Dermacro

Należy przejść do *Panelu sterowania*, wybrać opcję „Programy i funkcje” (w Windows XP będzie to „Dodaj/usuń programy”), odnaleźć „Dermacro” i po naciśnięciu na nim prawego klawisza myszy wybrać „Odinstaluj”.

Po chwili program zostanie usunięty.


Można także uruchomić plik instalatora Dermacro.msi i wykonać kilka kroków:

Wybrać „Usuń Dermacro” i wcisnąć „Zakończ”

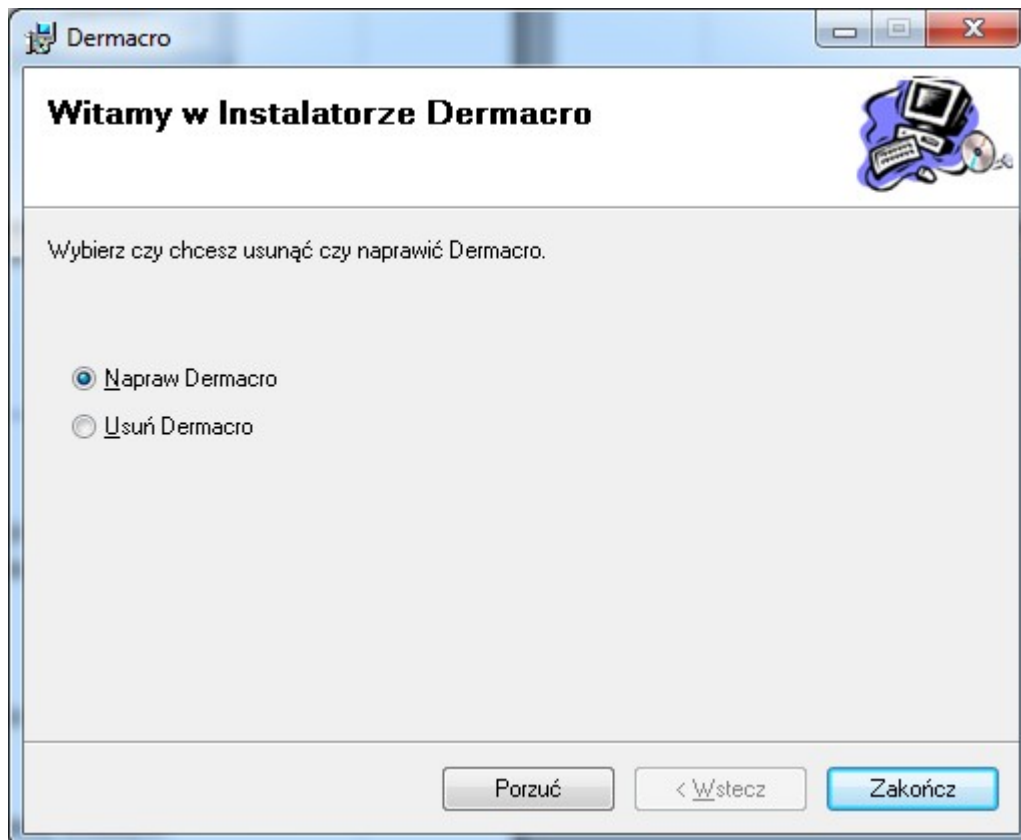

Pojawi się okno potwierdzenia uprawnień użytkownika, w którym należy potwierdzić zmiany dokonywane przez instalator.

Po zakończeniu pojawi się okno:

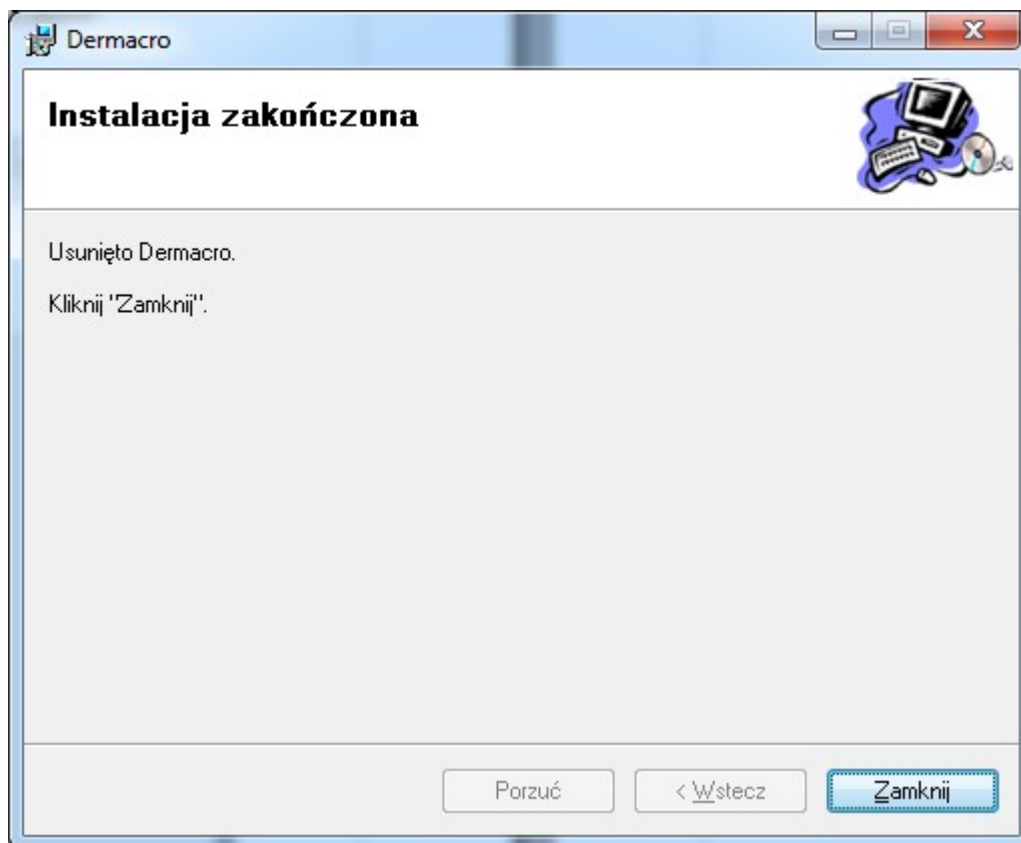

Uwaga: baza danych i pliki powstałe w trakcie pracy programu NIE zostaną usunięte.  
Pliki danych programu znajdują się w katalogu danych aplikacji wszystkich użytkowników (w Windows XP jest to katalog np. C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Dermacro a w Windows 7: C:\ProgramData\Dermacro).

## Pomoc w razie problemów

W razie problemów prosimy o kontakt z Jarosławem Andrzejewskim (tel. 601 324634, email: [techniczny@dermacro.com](mailto:techniczny@dermacro.com)) a także o odwiedzenie strony:

[www.dermacro.com](http://www.dermacro.com)